

Saver One[®] AEDs Series

EN
IT
FR
ES

Rev. A1/2013

the new generation



 **ami.italia**
medical products

info@amiitalia.com
www.amiitalia.com

**AED
DAE
DEA**

**Quick Guide
Guia Rápida
Guide Rapide
Guía Rápida**

Dear Customer, thank you for choosing our device. To validate its warranty, please fill in the Warranty Card and mail it within 30 days of purchase to our production facility address.

Gentile Cliente, grazie per aver scelto il nostro dispositivo. Per convalidare la sua garanzia, si prega di compilare la Scheda di Garanzia e spedirla entro 30 giorni dall'acquisto alla nostra officina di produzione.

Cher Client, merci d'avoir choisi notre appareil. Pour valider sa garantie, s'il vous plaît de remplir la Carte de Garantie et l'envoyer dans les 30 jours suivant l'achat à notre installation de production.

Estimado Cliente, gracias por elegir nuestro dispositivo. Para validar su garantía, por favor llene la Tarjeta de Garantía y enviarla dentro de los 30 días de la compra a nuestra planta de producción.



Office: Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano - Italy
Tel: +39.02.20509246
Fax: +39.02.29520839

Office and Production: Cupa Reginella, 15
80010 Quarto - Italy
Tel: +39.081.8060574
Fax: +39.081.8764769

info@amiitalia.com
www.amiitalia.com



Warranty Card
Scheda di Garanzia
Carte de Garantie
Tarjeta de Garantía

SaverOne[®]
series

/ /


| | | |
|--|---|---|
| Device Model Modello del Dispositivo Modèle du Dispositif Modelo de Dispositivo | Serial Number (see label on the back) Numero di Serie (vedere l'etichetta sul retro) Numéro de Série (voir l'étiquette sur le dos) Número de Serie (ver la etiqueta en la parte posterior) | Date of Purchase Data d'Acquisto Date d'Achat Fecha de la Compra |
|--|---|---|

| | |
|--|--|
| End User's Name Nome dell'Utente Finale Nom de l'Utilisateur Final Nombre del Usuario Final | Address Indirizzo Adresse Dirección |
|--|--|


| | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| City Città Ville Ciudad | State/Province/Region Stato/Provincia/Regione Etat/Province/Région Estado/Provincia/Región | Postal Code Codice Postale Code Postal Código Postal | Country Paese Pays País |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| Telephone Number Numero di Telefono Numéro de Téléphone Número Telefónico | Fax Number Numero di Fax Numéro de Fax Número de Fax | Email Address Indirizzo Email Adresse Email Correo Electrónico |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| Seller's Company Name Ragione Sociale del Venditore Nom du Vendeur Nombre del Vendedor | Seller's Country Paese del Venditore Pays du Vendeur País del Vendedor | Seller's Phone Number Telefono del Venditore Téléphone du Vendeur Teléfono del Vendedor |
|---|---|--|



A.M.I. ITALIA S.r.l.
Via Cupa Reginella, 15
80010 Quarto
ITALY

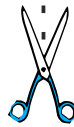

Saver One®

AED (Public Access) Semi-Automatic and Fully Automatic
DAE (Accesso Pubblico) Semiautomatico e Completamente Automatico
DEA (Grand Public) Semi-Automatique et Entièrement Automatisé
DEA (Acceso Público) Semi-Automático y Completamente Automático

| | | | |
|------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| SVO-B0001 | SAVER ONE | Semi-Automatic | 200J Standard |
| SVO-B0002 | SAVER ONE | Semi-Automatic | 360J Power |
| SVO-B0847 | SAVER ONE | Fully Automatic | 200J Standard |
| SVO-B0848 | SAVER ONE | Fully Automatic | 360J Power |

Saver One D®

AED with ECG Monitoring
DAE con Monitoraggio ECG
DEA avec Surveillance ECG
DEA con Monitorización ECG

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| SVD-B0004 | SAVER ONE D | 200J Standard |
| SVD-B0005 | SAVER ONE D | 360J Power |

Saver One P®

AED with ECG Monitoring and Manual override
DAE con Monitoraggio ECG e modalità Manuale
DEA avec Surveillance ECG et mode Manuel
DEA con Monitorización ECG y desfibrilación Manual

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| SVP-B0006 | SAVER ONE P | 200J Standard |
| SVP-B0007 | SAVER ONE P | 360J Power |



**AED
DAE
DEA**

SaverOne[®]
series

The AED should only be used by properly trained individuals !

Indications for use: Use the AED when a suspected cardiac arrest victim has an apparent **lack of circulation** as indicated by:

1. Unconsciousness, and
2. Absence of normal breathing, and
3. Absence of a pulse or signs of circulation.

Il DAE deve essere utilizzato solo da persone adeguatamente addestrate !

Indicazioni per l'uso: Utilizzare il DAE quando una vittima sospetta di arresto cardiaco ha una apparente **mancaanza di circolazione**, come indicato da:

1. Incoscienza, e
2. Assenza di respirazione normale, e
3. Assenza di polso o di segni di circolazione.

Le DEA devrait être utilisé que par des personnes dûment formées !

Indications d'utilisation: Utiliser le DEA quand une victime suspectée d'arrêt cardiaque a un apparent **manque de circulation** comme indiqué par:

1. Inconscience, et
2. Absence de respiration normal, et
3. Absence de pulse ou de signes de circulation.

El DEA debria ser utilizado sólo por personas debidamente entrenadas !

Indicaciones para el uso: Utilizar el DEA cuando una víctima sospechada de paro cardíaco tiene una aparente **falta de circulación**, como se indica por:

1. Inconsciencia, y
2. Ausencia de respiración normal, y
3. Ausencia de pulso o signos de circulación.



Being a life-saving device, the AED should always be available for use. Once purchased, it's good practice to activate it by connecting the battery and never disconnect it.

Essendo un dispositivo salvavita il DAE dovrebbe essere sempre disponibile per l'uso. Una volta acquistato, è buona prassi inserire da subito la batteria e non scollegarla mai.


Étant un dispositif de sauvetage, le DEA doit toujours être disponible pour l'utilisation. Une fois acheté, il faut l'activer en conectant la batterie et sans jamais la débrancher.

Al ser un dispositivo de salvamento, el DEA debe estar siempre disponible para su uso. Una vez comprado, debe ser activado conectando la batería y nunca desconectarla.


Fast Lifesaving
Salvavita Veloce
Sauvetage Rapide
Salvavidas Rápido

SaverOne
series


Turn On
Accendere
Allumer
Encender

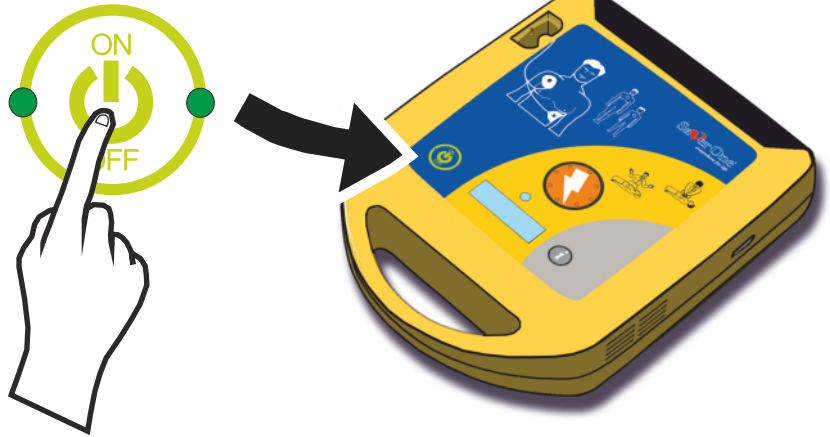

Place pads
Applicare piastre
Placer électrodes
Colocar electrodos

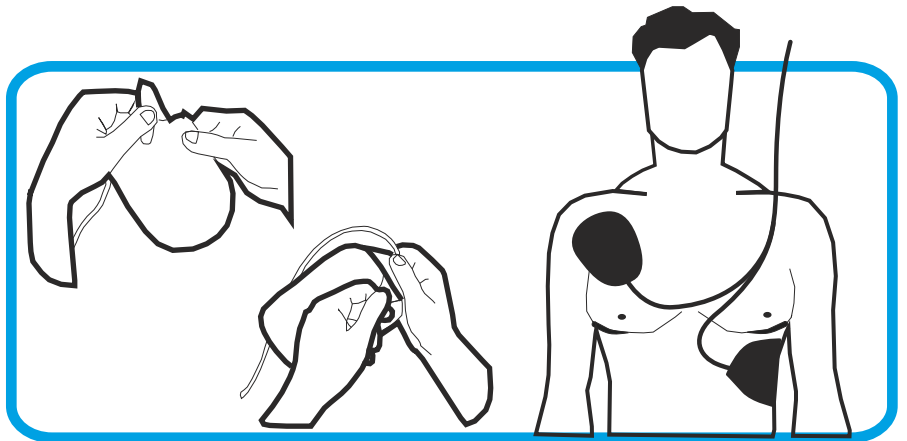

Give the Shock
Defibrillare
Choquer
Choquar

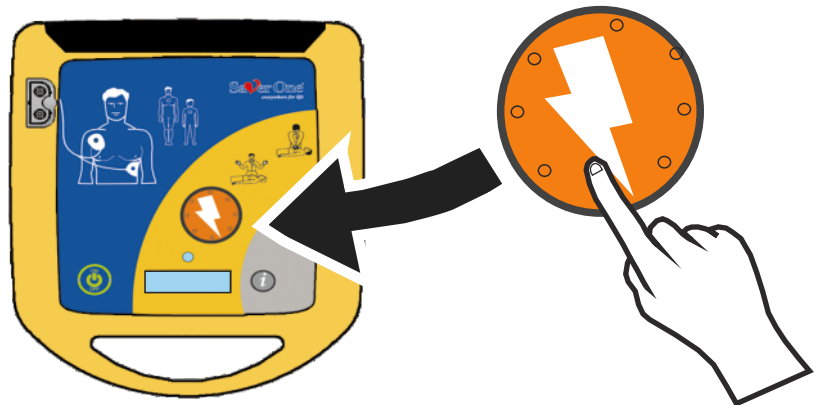

The Fully Automatic model will give the shock after a warning vocal message
Il modello Completamente Automatico defibrillerà dopo un messaggio vocale d'avviso
Le modèle Entièrement Automatique donnera le choc après un message vocal d'alerte
El modelo Completamente Automático dará el choque después de un mensaje vocal

Box Contents

Contenuto della Confezione


Contenu de l'Emballage

Contenido del Envase


SaverOne
series

(CONF-NORM)


Standard Configuration
Configurazione Standard
Configuration Standard
Contenido estándar

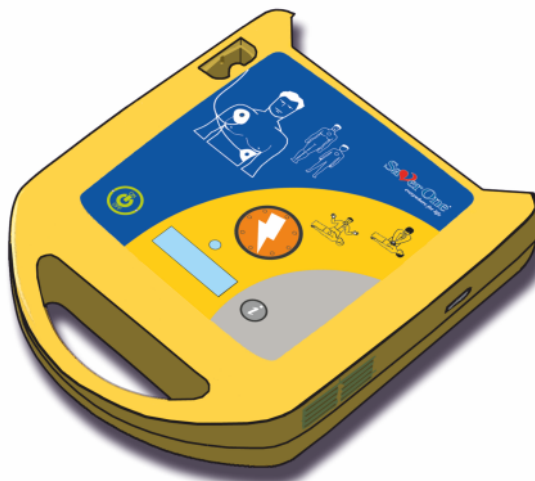

Defibrillator
Defibrillatore
Défibrillateur
Desfibrilador

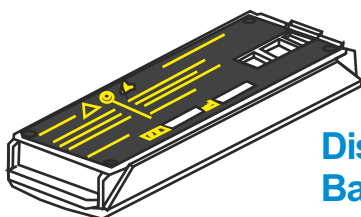

Disposable Battery
Batteria Monouso
Pile Jetable
Batería Desechable

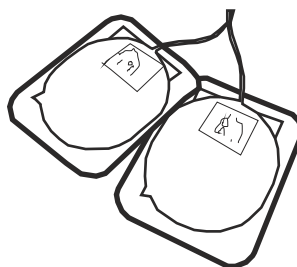

Pair of Adult Pads
Paio di Elettrodi Adulto
Paire d'Électrode Adulte
Par de Electrodos Adultos



Carrying Case
Borsa da Trasporto
Sac de Transport
Maletín de Transporte



Operating Guide and CD
Guida Operativa e CD
Guide Opérationell et CD
Guía Operativa y CD



Read the **User Manual** included in the **CD**
Leggere il **Manuale d'Uso** inserito nel **CD**
Lire le **Manuel d'Utilisation** inclus sur le **CD**
Leer el **Manual de Usuario** incluido en el **CD**

Device Activation

Attivazione del Dispositivo


Activation du Dispositif

Activación del Dispositivo


SaverOne[®]
series

Connect the battery
Collegare la batteria
Connecter la batterie
Conectar batería

1.

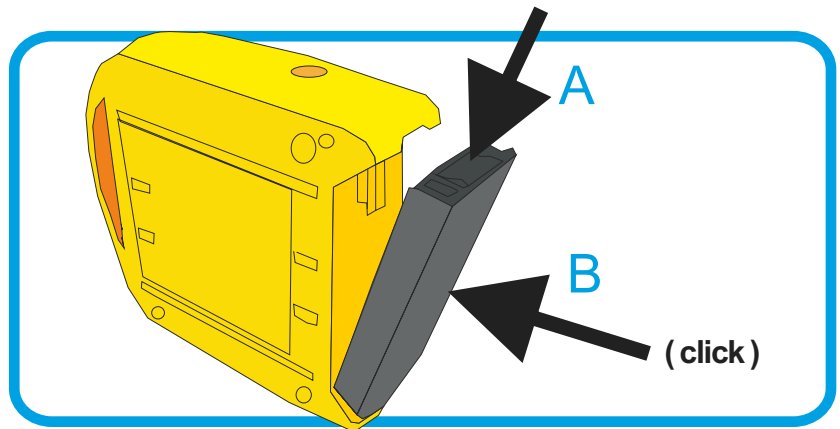

2.

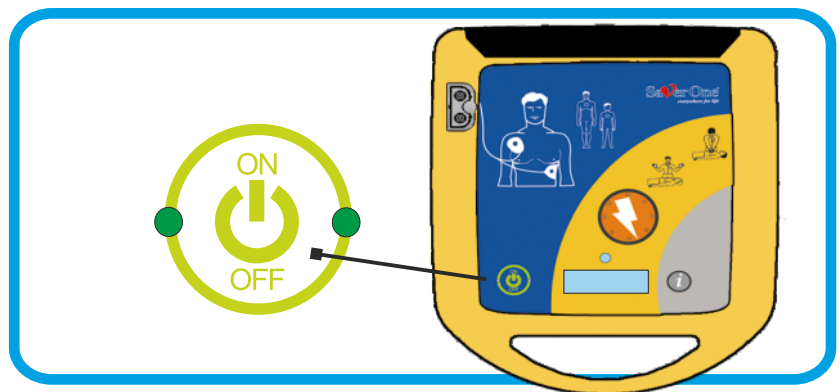


Automatic start-up
Accensione automatica
Démarrage automatique
Encendido automático

3.



Initial self-test
Autotest iniziale
Auto-test initial
Auto-test inicial

 The Fully Automatic has no shock button to press / Il Completamente Automatico non ha il pulsante di shock
L'Entièrement Automatique n'a pas le bouton de choc / El Completamente Automático no tiene el botón de choque


Device Structure

Struttura del Dispositivo


Structure du Dispositif

Estructura del Dispositivo

SaverOne®
Semi-Automatic

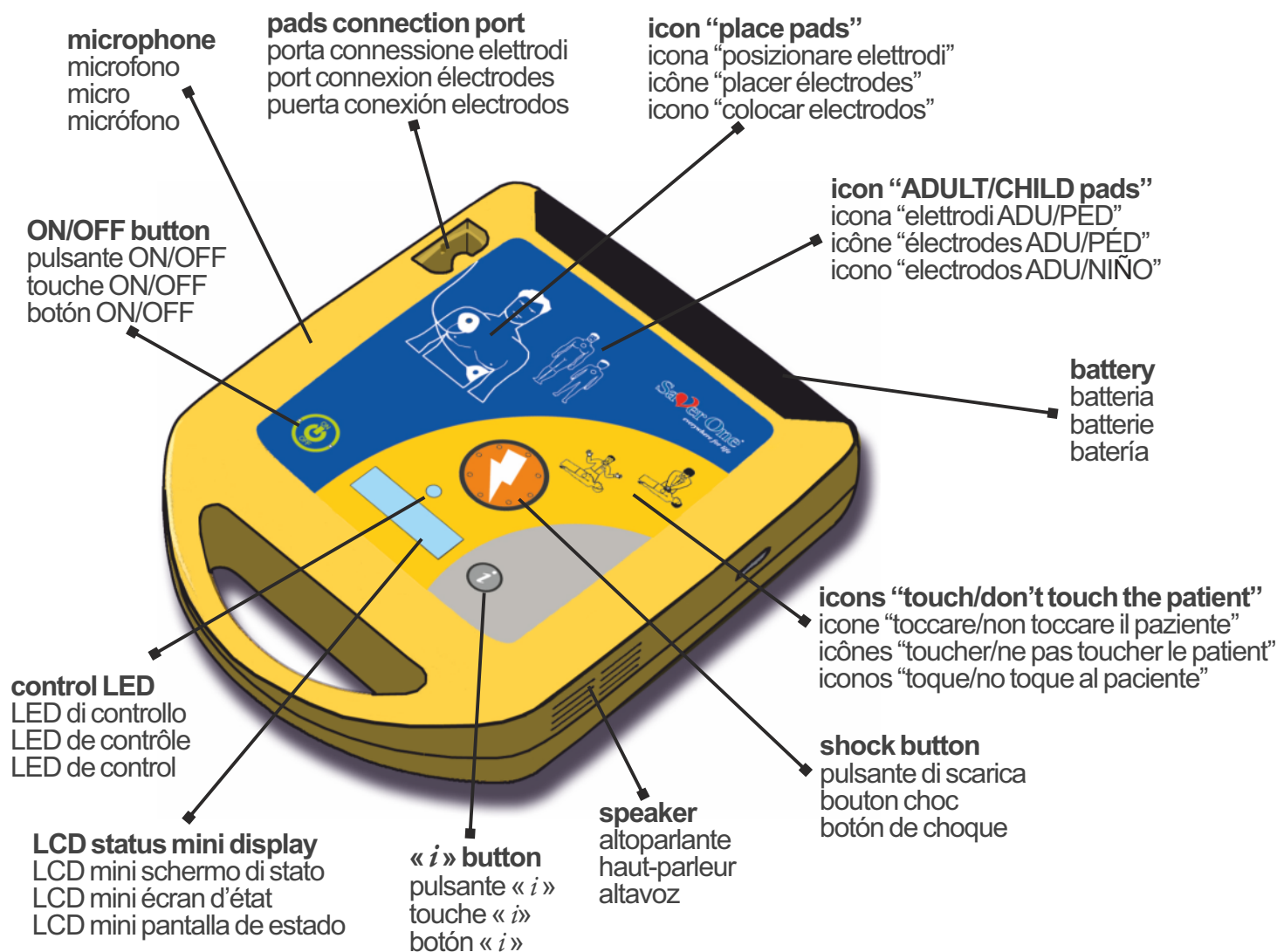


rear view / vista posteriore vue arrière / vista posterior

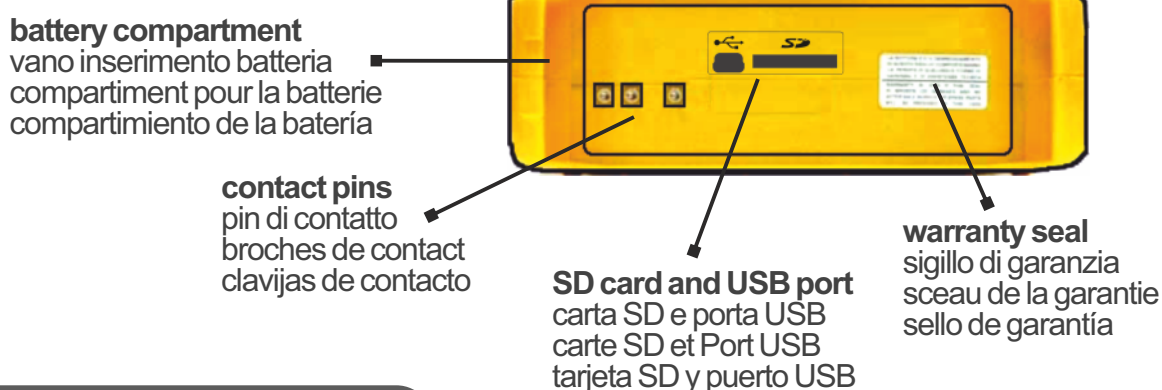


Device Structure Struttura del Dispositivo Structure du Dispositif Estructura del Dispositivo

Saver One®
Fully Automatic

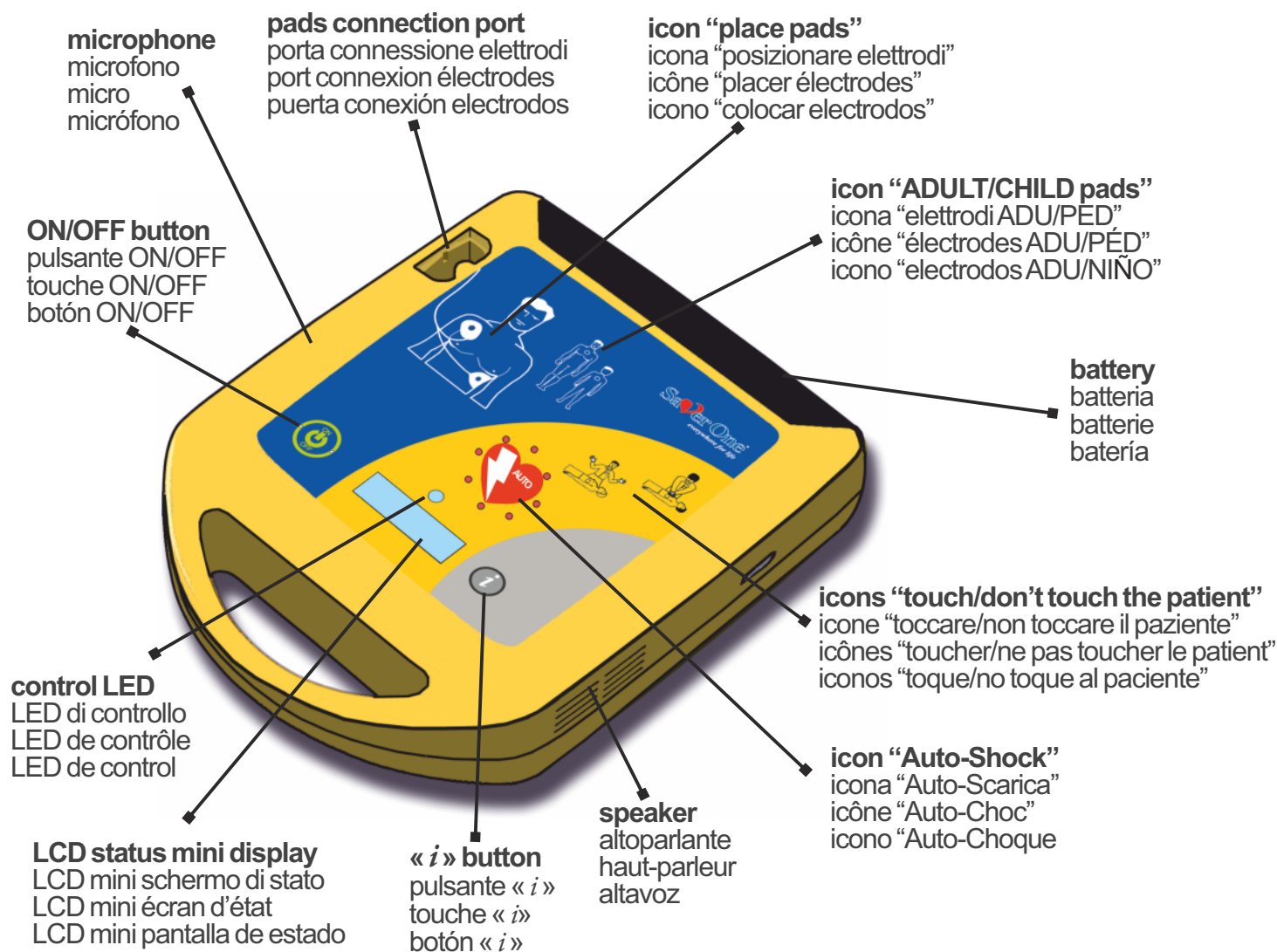

rear view / vista posteriore vue arrière / vista posterior

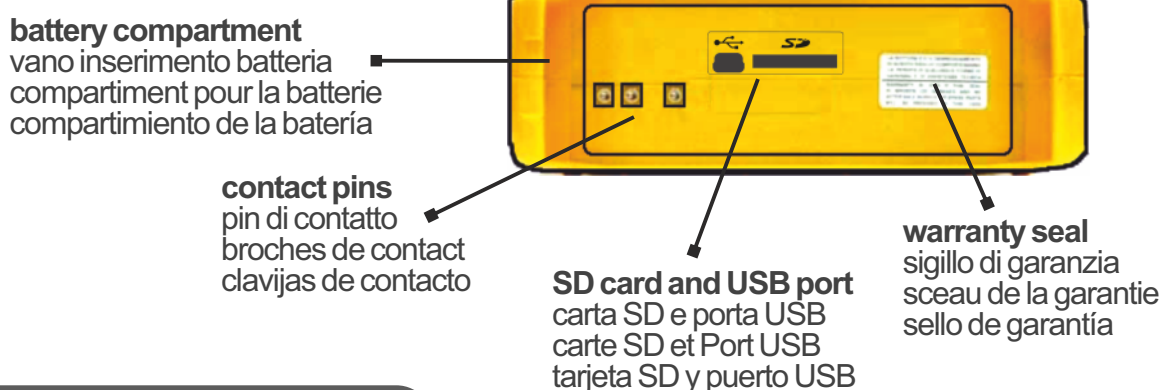


Device Structure

Struttura del Dispositivo

Structure du Dispositif


Estructura del Dispositivo

SaverOne D[®]

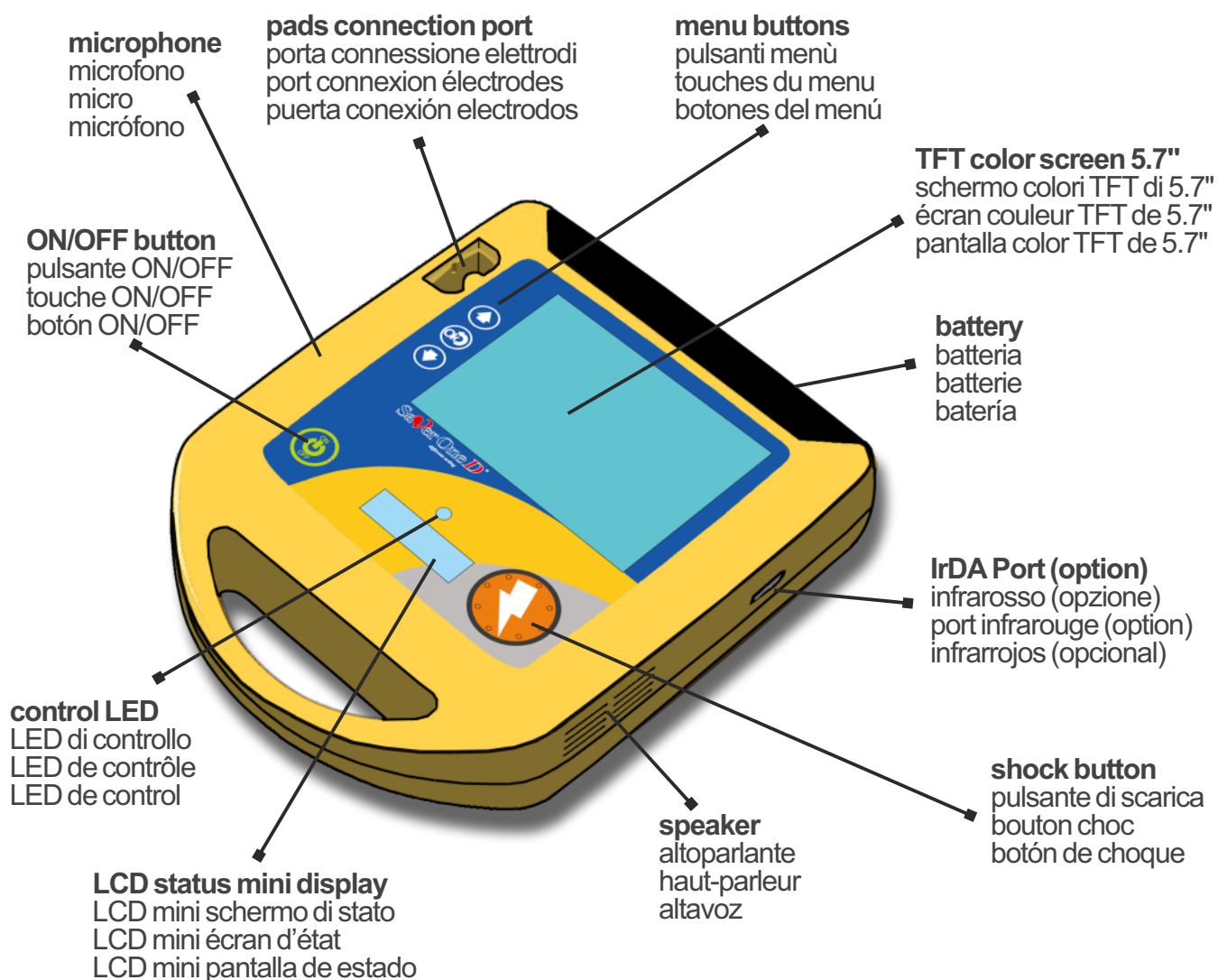

rear view / vista posteriore

vue arrière / vista posterior

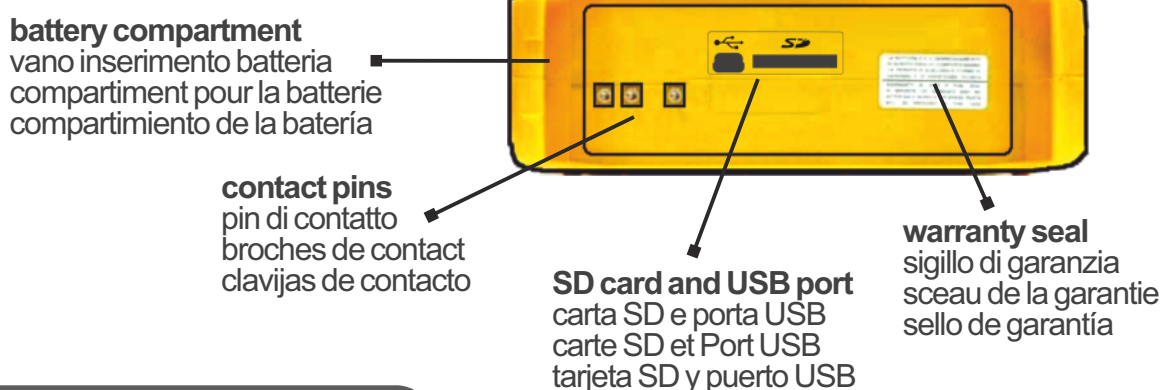


Device Structure

Struttura del Dispositivo

Structure du Dispositif


Estructura del Dispositivo

Saver One P

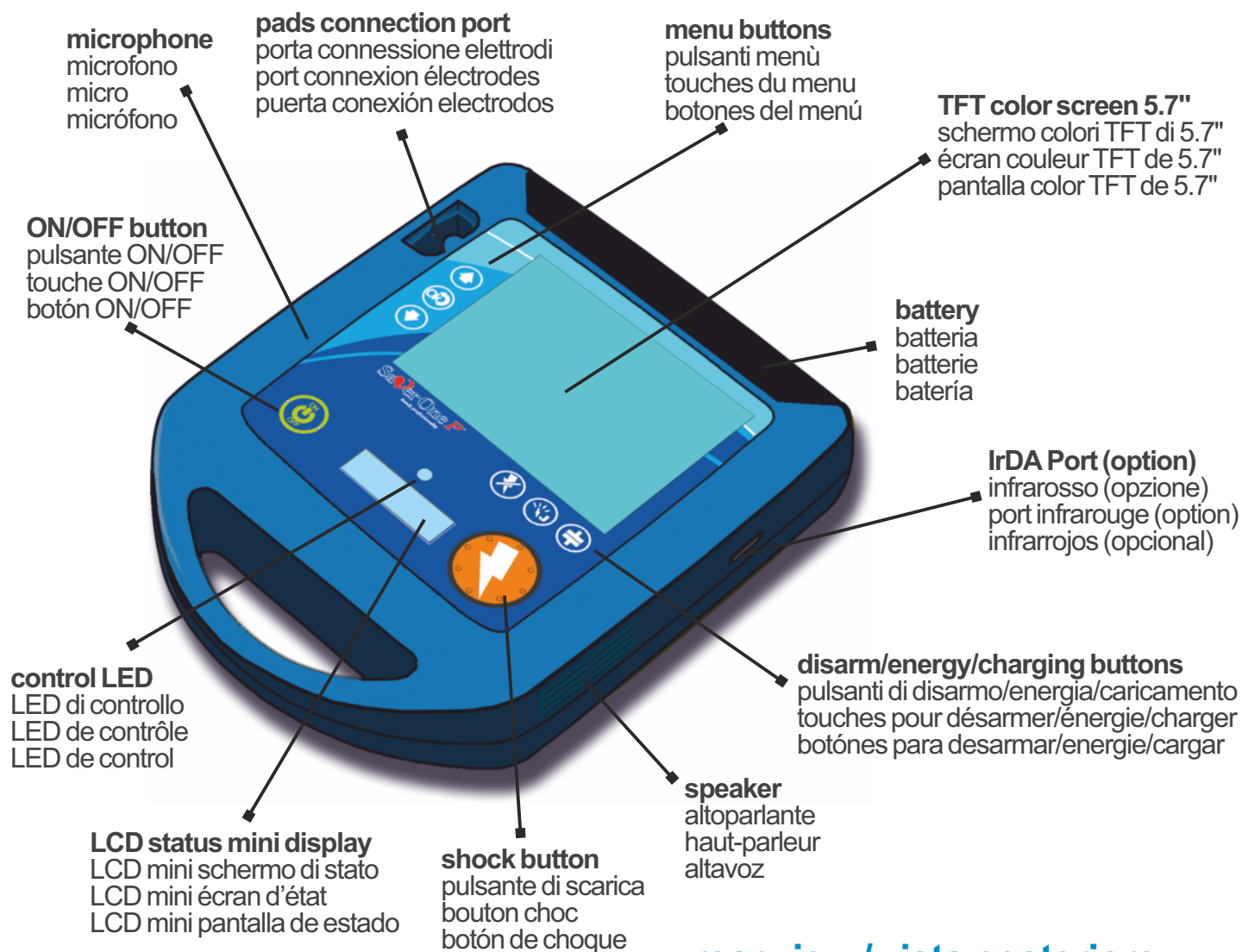

rear view / vista posteriore

vue arrière / vista posterior

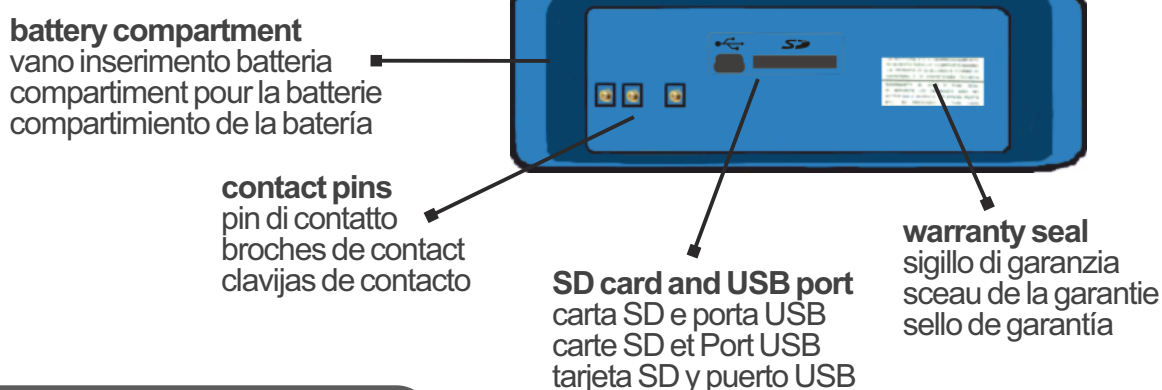

Mini Display Mini Schermo Mini Ecran Mini Pantalla

SaverOne
series



Some devices may not have the mini display
Alcuni dispositivi potrebbero non avere il mini schermo
Certains appareils peuvent ne pas avoir le mini-écran
Algunos dispositivos pueden no tener mini pantalla

All models in Stand-by
Tutti i modelli in Stand-by
Tous les modèles en Mode Veille
Todos los modelos en Espera



**DEVICE ERROR 105
SERVICE REQUIRED**

battery gauge or device warnings
indicatore della batteria o allarmi sul dispositivo
indicateur de batterie ou alarmes sur le dispositif
indicador de batería o alarmas del dispositivo

Only SAVER ONE operating
Solo SAVER ONE in funzione
Le seul SAVER ONE en marche
Sólo el SAVER ONE en marcha

1.

analysing
heart rhythm




text messages / messaggi di testo
messages de texte / mensajes de texto

2.

MODEL: ONE 200J
S/N: 05ISO2213004
POWER: BATTERY

PROTOCOL: 150-200-200J
SHOCKS: 6
DATE: 01/02/2013

LANGUAGE → ENGLISH
English
Français

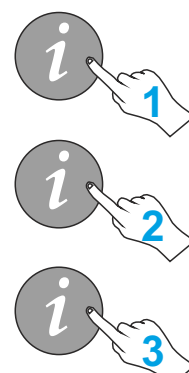

Keep pressing to change language
Tenere premuto per cambiare lingua
Maintenir appuyé pour changer la langue
Mantener presionado para cambiar idioma

TFT Screen Structure


Struttura dello Schermo TFT

Structure de l'Ecran TFT

Estructura de la Pantalla TFT

Saver One **D**[®]

Saver One **P**[®]

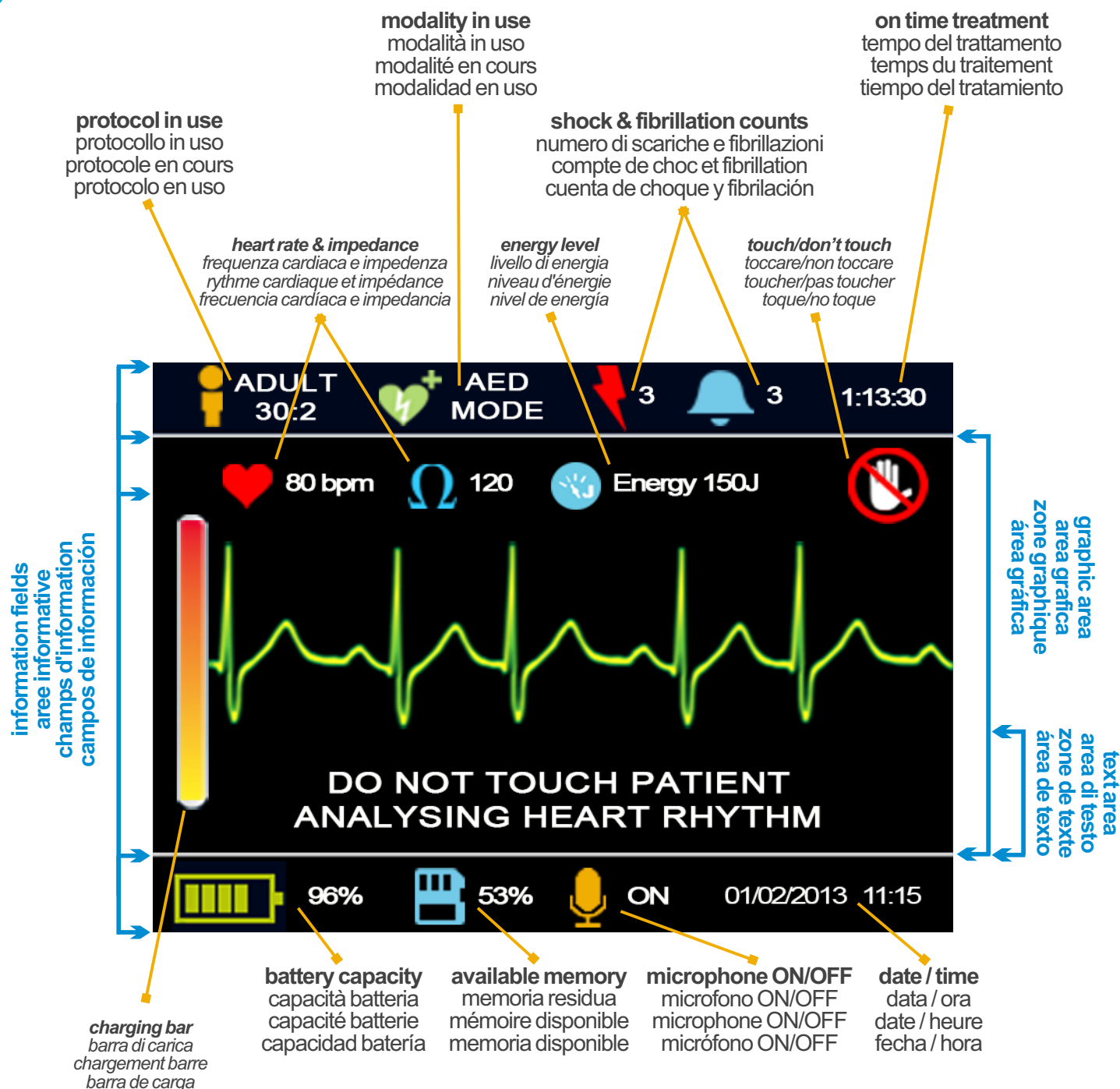

Menu Buttons

Pulsanti del Menu

Boutons de Menu


Botones del Menú

SaverOne *D*[®]

SaverOne *P*[®]


To enter the menu
Per accedere al menu
Pour accéder au menu
Para acceder al menú

1.

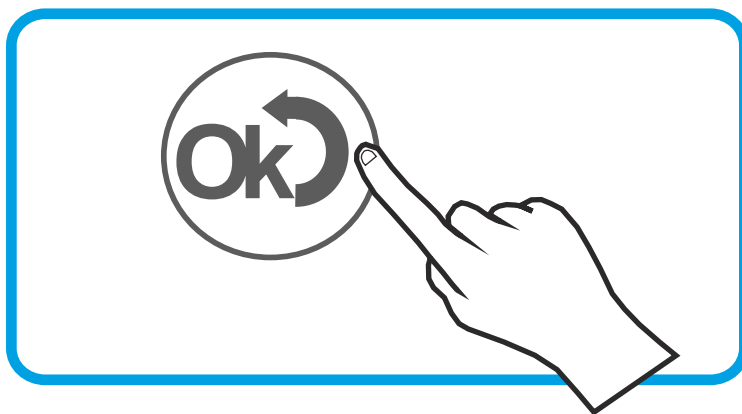


To navigate (up / down)
Per navigare (su / giù)
Pour naviguer (haut / bas)
Para navegar (arriba / abajo)

2.

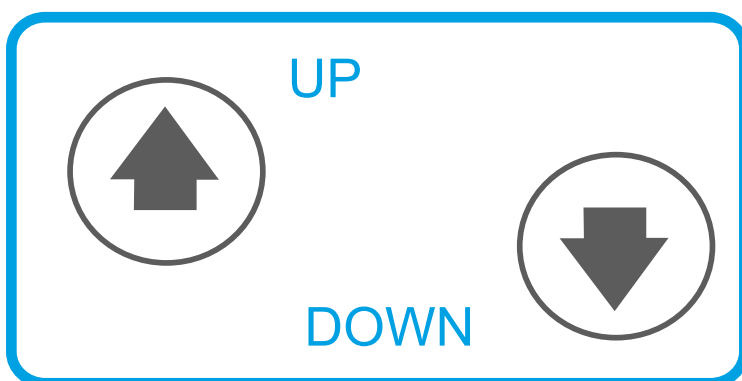

To confirm the selection
Per confermare la selezione
Pour confirmer la sélection
Para confirmar selección

3.

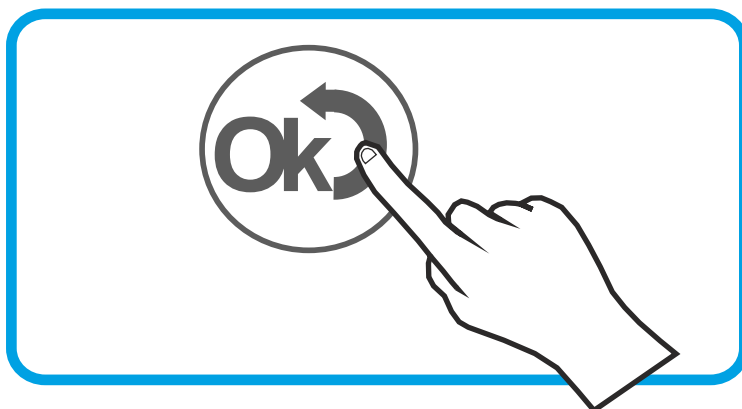

Modes of Utilisation

Modalità di Utilizzo

Modes d'Utilisation

Modos de Utilización

Saver One **D**[®]


Saver One **P**[®]




Upon turned on, any model starts to operate in automated mode (AED by default)
 All'accensione, qualsiasi modello inizia ad operare in modalità automatica (DAE di default)
 Une fois allumé, n'importe quel modèle commence à fonctionner en mode automatisé (DEA par défaut)
 Una vez encendido, cualquier modelo comienza a funcionar en modo automático (DEA predeterminado)

Enter the menu
 Accedere al menu
 Accéder au menu
 Acceder al menú

1.

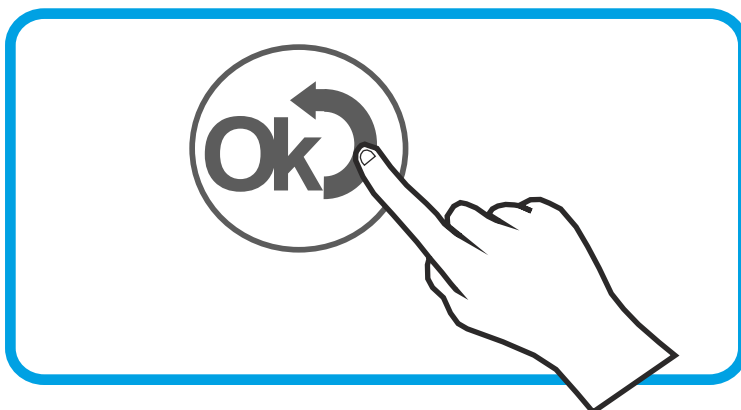


2.

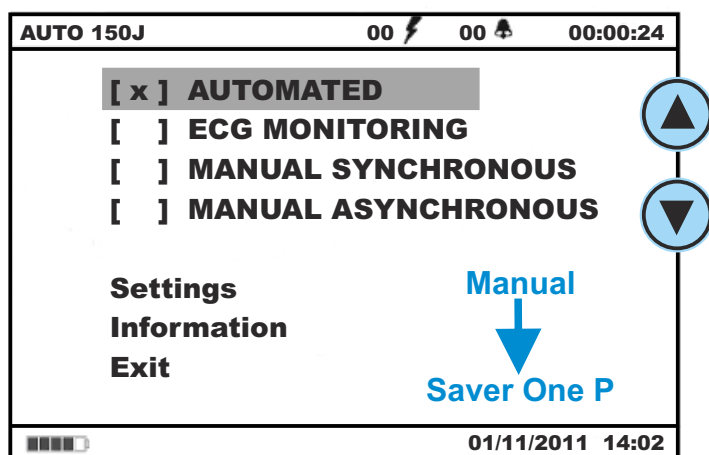

Select other modes
 Selezionare altre modalità
 Sélectionner d'autres modes
 Seleccionar otros modos

3.

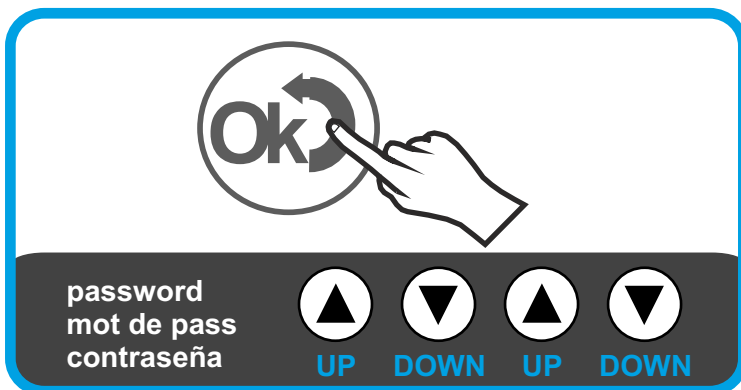

Confirm with password
 Confermare con password
 Confirmer avec mot de passe
 Confirmar con contraseña

Manual Mode (Synch / Asynch) Modo Manuale (Sinc / Asinc) Mode Manuel (Sinch / Asinch) Modo Manual (Sinc / Asinc)


Saver One P[®]



The manual mode is available only in Saver One P and is used by qualified personnel
 La modalità manuale è operativa solo nel Saver One P ed è utilizzata da personale qualificato
 Le mode manuel ne fonctionne qu'avec le Saver One P et n'est utilisé que par du personnel qualifié
 El modo manual funciona sólo con el Saver One P y es usado por personal calificado


1
 Select the energy level
 Scegliere il livello d'energia
 Sélectionner le niveau d'énergie
 Seleccionar el nivel de energía

1.

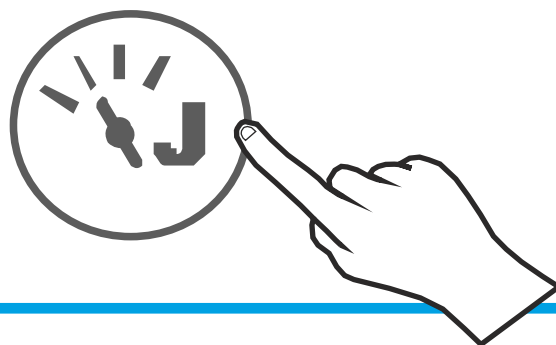


2
 Charge the device
 Caricare il dispositivo
 Charger l'appareil
 Cargar el dispositivo

2.

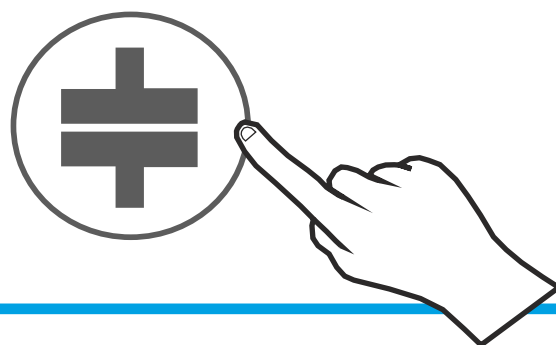

3
 Press the shock button
 Premere il pulsante di scarica
 Appuyer sur le bouton choc
 Pulsar el botón de choque

3.

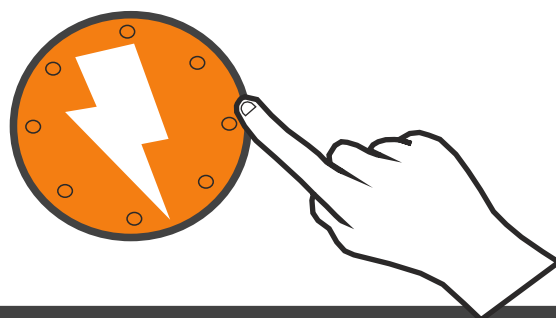

Press this button to disarm the unit
 Premere questo pulsante per il disarmo
 Appuyer ce bouton pour désarmer l'appareil
 Pulsar el botón para desarmar el dispositivo

Status Indicators

Indicatori di Stato

Indicateurs d'Etat

Indicadores de Estado

SaverOne[®]
series

Control LED green / red blinking
LED di Controllo verde / rosso lampeggiante
LED de Contrôle vert / rouge clignotant
LED de Control verde / rojo parpadeante



or fixed
oppure fisso
ou fixe
o fija



Mini Display and Voice Messages
Mini Schermo e Messaggi Vocali
Mini Écran et Messages Vocaux
Mini Pantalla y Mensajes de Voz




| | | | |
|--|---|----------|--|
| IN STAND-BY (with battery) IN STAND-BY (con batteria) MODE VEILLE (avec batterie) EN ESPERA (con batería) | Device ready for use Dispositivo pronto all'uso Dispositif prêt à l'emploi Dispositivo listo para su uso | | 100% |
| | Warning for a low battery level, replace it Avvertenza di batteria scarica, cambiarla Avertissement de batterie déchargée, à changer Advertencia de batería baja, reemplazarla | | |
| | Faulty device, needs service Dispositivo guasto, necessita di assistenza Dispositif défectueux, doit être réparé Dispositivo defectuoso, necesita servicio | | DEVICE ERROR 105 SERVICE REQUIRED |
| WORKING IN FUNZIONE EN FONCTIONNEMENT EN LA OPERACIÓN | Device working Dispositivo in funzione Dispositif en fonctionnement Dispositivo en la operación | OFF | stay clear of patient charging |
| | Warning: battery is getting low (5% left) Avviso: batteria in esaurimento (5% residuo) Remarque: batterie faible (5% résiduel) Aviso: batería baja (5% residual) | OFF | no shock advised 5% battery is getting low batteria in esaurimento batterie faible batería se está agotando |
| | Caution! low battery, replace it Attenzione! batteria scarica, sostituirla Prudence! batterie déchargée, la remplacer Precaución! batería baja, reemplazarla | | low battery, replace it batteria scarica, sostituirla batterie déchargée, la remplacer batería baja, reemplazarla |

Lifesaving Treatment with AED Procedura Salvavita con DAE Sauvetage avec le DEA Salvavidas con el DEA

SaverOne[®]
series

Turn on the device
Accendere il dispositivo
Allumer l'appareil
Encender el dispositivo

1.

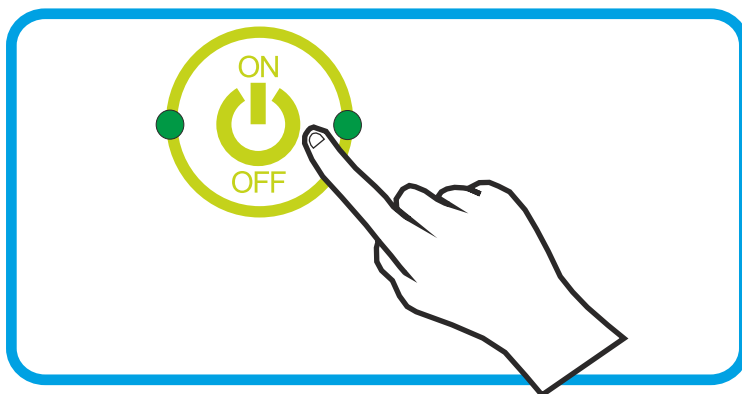


Follow voice prompts
Seguire le istruzioni
Suivre les instructions
Seguir las instrucciones

2.



Get the patient ready
Preparare il paziente
Préparer le patient
Preparar al paciente

3.

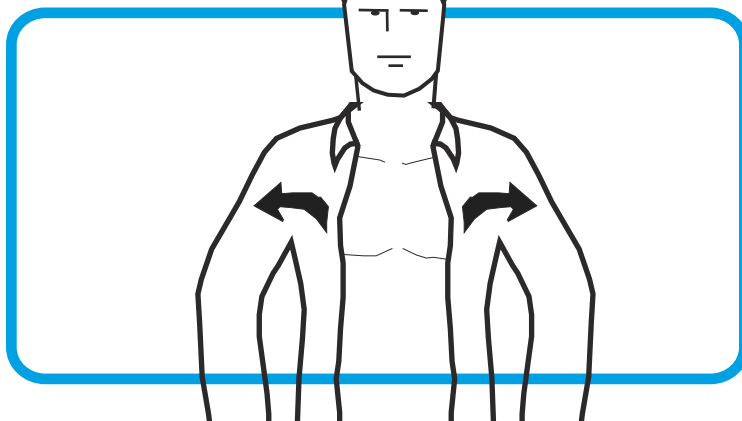


Elettrodes Positioning **Posizionamento degli Elettrodi** **Positionnement des Électrodes** **Colocación de los Electroodos**

SaverOne[®]
series


Plug in connector
 Collegare il connettore
 Brancher le connecteur
 Enchufar el conector

4.

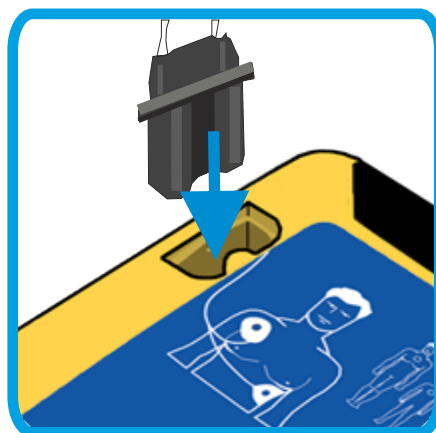

Open and remove covers
 Aprire e rimuovere la pellicola
 Ouvrir et décoller la protection
 Abrir y retirar la película


5.

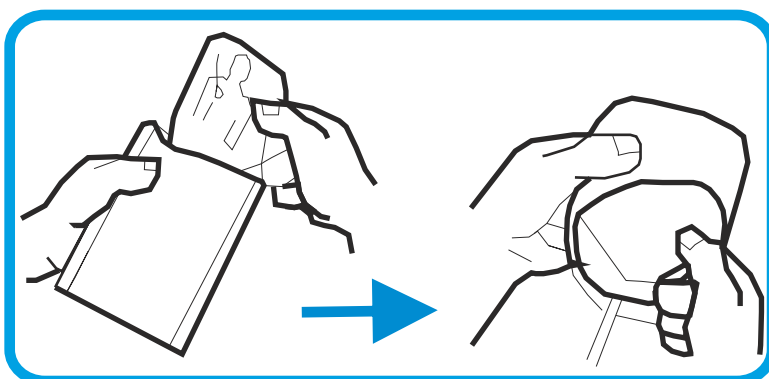

Apply to the patient
 Applicare al paziente
 Placer sur le patient
 Colocar al paciente


6.

ADULT

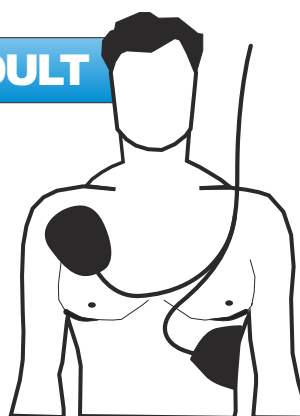

>8 years or >25 kg
 SAV-C0846

CHILD

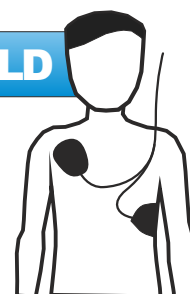


1÷8 years or <25 kg
 SAV-C0016

Analysis and Shock Analisi e Defibrillazione Analyse et Choc Análisis y Choque

Sa^{ver}One[®]
series


Cardiac rhythm analysis
Analisi del ritmo cardiaco
Analyse du rythme cardiaque
Análisis del ritmo cardíaco

7.

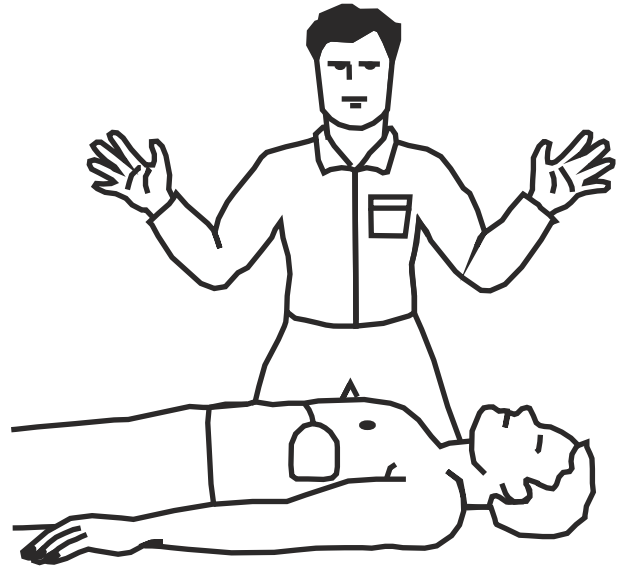

Press the shock button
Premere pulsante di scarica
Appuyer sur le bouton choc
Presionar botón de choque

8.

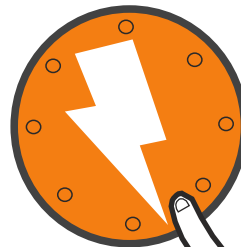

IF INSTRUCTED
SE RICHIESTO
SI DEMANDÉ
SI SE LE INDICA




The Fully Automatic version will give the shock automatically after a voice message
Il modello Totalmente Automatico darà la scarica in automatico dopo un messaggio vocale
Le modèle Entièrement Automatique donnera le choc automatiquement après un message vocal
El modelo Totalmente Automático dará el choque de forma automática después de un mensaje de voz

Cardiopulmonary Resuscitation Rianimazione Cardiopolmonare Réanimation Cardio-Respiratoire Reanimación Cardiopulmonar

SaverOne[®]
series


Make 30 compressions
Fare 30 compressioni
Effectuer 30 compressions
Efectuar 30 compresiones

9.

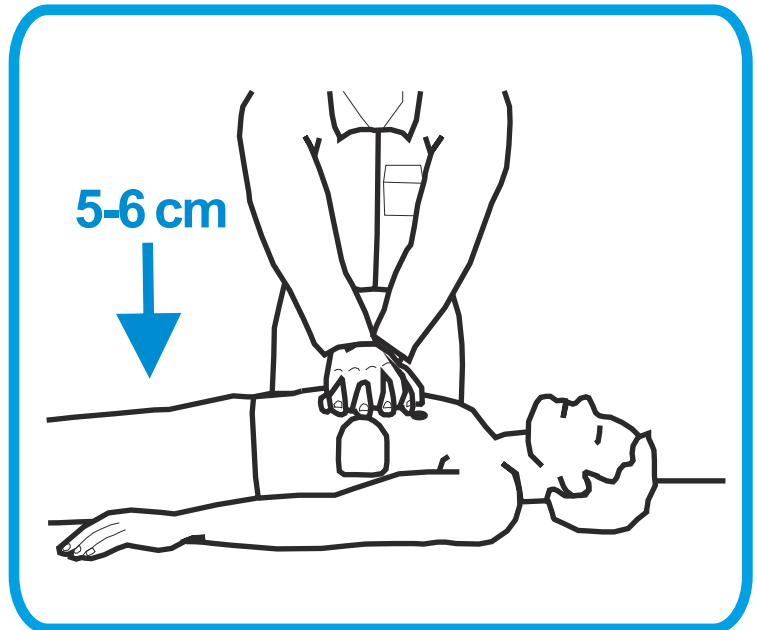

A metronome will guide for the appropriate number and rates of compressions
Un metronomo vi guiderà nel dare il giusto numero e frequenza di compressioni
Un métronome aidera pour le nombre et la fréquence appropriées des compressions
Un metrónomo ayudará para el número y la frecuencia apropiadas de compresiones

10.

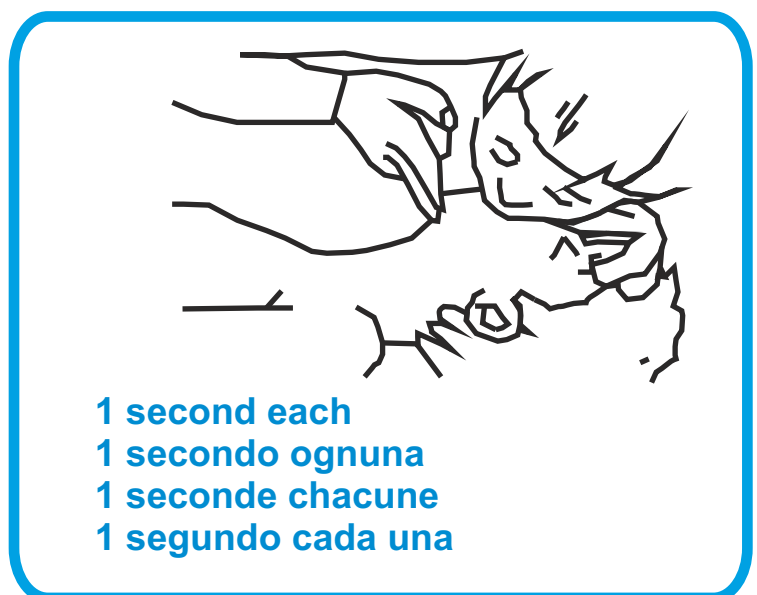


Give 2 breaths
Dare 2 insufflazioni
Effectuer 2 insufflations
Realizar 2 insuflaciones

Batteries Available Batterie Disponibili Batteries Disponibles Baterías Disponibles

SaverOne[®]
accessory

Disposable battery
Batteria monouso
Batterie jetable
Batería desechable

1.

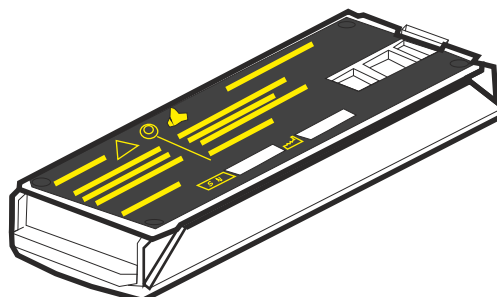



SAV-C0903



Before disconnecting the battery make sure the device is turned off for 5 seconds.
Prima di disconnettere la batteria accertarsi che il dispositivo sia spento da 5 secondi.
Avant de débrancher la batterie assurez-vous que le dispositif est éteint par 5 secondes.
Antes de desconectar la batería asegúrese de que el dispositivo está apagado por 5 segundos.

2.

SAV-C0011

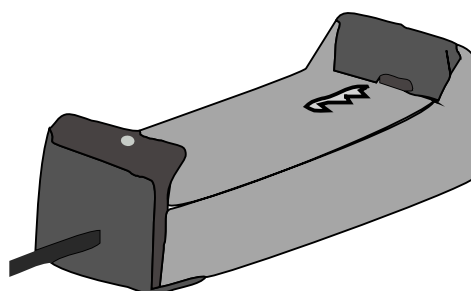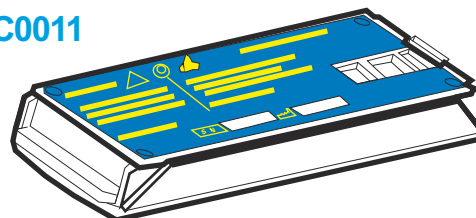

SAV-C0014




Recharge the Accumulator every 4-5 months (even if not used) or as soon as warned by the device.
Ante-date the recharging if kept outside the standard conditions of temperature (20°C) and humidity (45%).
Ricaricare l'Accumulatore ogni 4-5 mesi (anche se non utilizzato) o non appena indicato dal dispositivo.
Anticipare la ricarica se tenuto fuori dalle condizioni standard di temperatura (20°C) ed umidità (45%).
Recharger l'Accumulateur tous les 4-5 mois (même si pas utilisé) ou dès que demandé par le dispositif.
Anticiper sa recharge si le gardé dehors des conditions standard de température (20°C) et humidité (45%).
Recargar el Acumulador cada 4-5 meses (aunque no se utiliza) o cuando lo solicite el dispositivo.
Anticipar la recarga si tenido fuera de las condiciones estándar de temperatura (20°C) y humedad (45%).

Elektrodes Available Elettrodi Disponibili Electrodes Disponibles Electrodos Disponibles

SaverOne
accessory


Pre-connected for Adults
Pre-connesse per Adulti
Pré-connectés pour Adultes
Pre-conectados para Adultos

1.

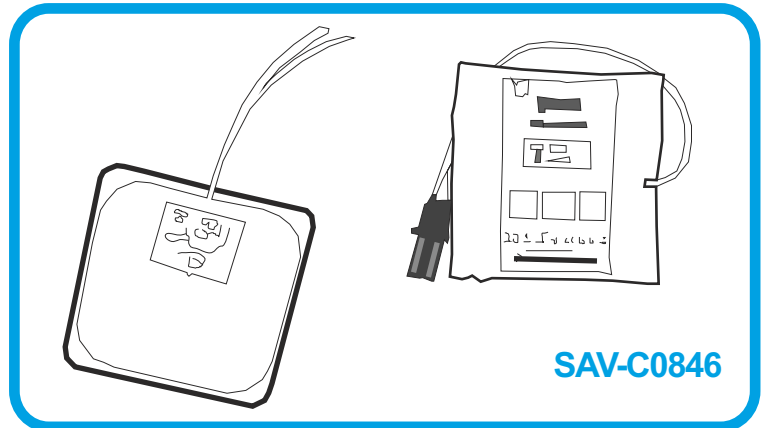

Pre-connected for Child
Pediatriche pre-connesse
Pédiatriques pré-connectés
Pediátricos pre-conectados

2.

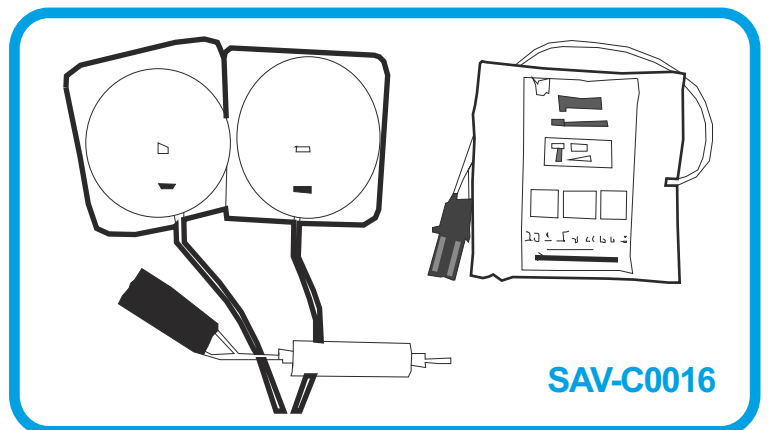

Device senses Pediatric Pads and adjusts itself for a lower energy level (50J)
Dispositivo rileva le Pediatriche e si auto-regola per un livello di energia basso (50J)
Dispositif détecte les Pédiatriques et s'autorégule pour un niveau d'énergie bas (50J)
Dispositivo detecta los Pediátricos y autorregula para un nivel de energía bajo (50J)

Accessories List

Lista degli Accessori

Liste des Accessoires

Lista de Accesorios

Saver One
accessory

Data Management
Gestione dei Dati
Gestion des Données
Gestión de Datos

1.

- SAV-C0906** SD Memory Card 1GB
Carta Memoria SD 1GB
Carte Mémoire SD 1GB
Tarjeta Memoria SD 1 GB
- SAV-C0027** Card Reader
Lettore Carte
Lecteur de Carte
Lector de Tarjetas
- SAV-C0019** PC Software
Software per PC
Logiciel sur PC
Software para PC

Trainer and Simulator
Trainer e Simulatore
Formateur et Simulateur
Entrenador y Simulador

2.

- SVT-B0008** "Saver One T" Trainer
Trainer "Saver One T"
Formateur "Saver One T"
Entrenador "Saver One T"
- SVT-C0612** Trainer Pads (10 pair)
Elettrodi per Trainer (10 paia)
Électrodes Formateur (10 paires)
Electrodos Entrenador (10 pares)
- SSS-B0009** AED Simulator/Tester
Simulatore/Tester per DAE
Simulateur/Testeur pour DAE
Simulador/Probador por DEA

ECG and Keeping
ECG e Custodie
ECG et Préservation
ECG y Preservación

3.

- SAV-C0017** ECG Cable
Cavo ECG
Câbles ECG
Cables ECG
- SAV-C0018** Thermal Printer
Stampante Termica
Imprimante Thermique
Impresora Térmica
- SAV-C0908** Semi-Rigid Carry Case
Borsa Trasporto Semi-Rigida
Sac de Transport Semi-Rigide
Maleta de Transporte Semi-Rígido
- SAV-C0902** Metal Wall Bracket
Supporto Murale in Metallo
Support Mural en Métal
Soporte de Pared en Metal
- SAV-C0028** Wall Cabinet with/without alarms
SAV-C0836 Armadio Murale con/senza allarmi
Armoire Murale avec/sans alarmes
Armario de Pared con/sin alarmas

"Ready-to-Use" Checks

Controlli "Pronto all'Uso"

Contrôles "Prêt-à-l'Emploi"

Controles "Listo-para-Usar"

SaverOne
series



CONTROL LED
LED di CONTROLLO
LED de CONTRÔLE
LED de CONTROL



PADS EXPIRATION
SCADENZA ELETTRODI
EXPIRATION ÉLECTRODES
EXPIRACIÓN ELECTRODOS



DEVICE
DISPOSITIVO
DISPOSITIF
DISPOSITIVO

| Date Data Date Fecha | Is flashing only in green? Lampeggia solo verde? Clignote uniquement en vert? Está parpadeando sólo en verde? | Is the date still valid? La data è ancora valida? La date est encore valide? La fecha es válida? | Visual inspection Controllo visivo Inspection visuelle Inspección visual | Signature Firma Signature Firma |
|-------------------------------|--|---|---|--|
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |
| | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/> | <input type="button" value="ok"/> | |



Checks should be daily (or at least once a week).

Do not use the device in case it doesn't succeed checks.

Il controllo dovrebbe essere giornaliero (o almeno una volta alla settimana).

Non utilizzare il dispositivo nel caso non abbia superato i controlli.

Le contrôle devrait être quotidienne (ou au moins une fois par semaine).

Ne pas utiliser l'appareil lorsque les contrôles ne sont pas passés.

El control debería ser diario (o por lo menos una vez a la semana).

No utilice el dispositivo en caso de que no logre los controles.

Saver One[®]

the new generation



info@amiitalia.com

www.amiitalia.com